




neodisher® MediKlar



Sköljmedel för maskinell behandling av termostabila och termolabila instrument

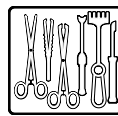

Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Eftersköljning av medicintekniska produkter såsom kirurgiska instrument inklusive oftalmiska instrument, anesthesiutrustning, instrumentbehållare och implantat samt nappflaskor i rengörings- och desinfektionsapparater

Effektspektrum:

- Mycket goda vätningssegenskaper – för en snabb torkning utan ränder av det gods som behandlas
- Sterila förpackningar av papper/film påverkas inte negativt av kontakt med medicintekniska produkter som har behandlats med neodisher MediKlar
- Tillbehörsdelar för anesthesiutrustning av polysulfon (PSU) samt av polyfenylen-sulfon (PPSU), såsom kopplingar till larynxmasker, ventiler, adaptrar och delar av instrumentbehållarlock kan bilda spänningssprickor när de kommer i kontakt med sköljmedel. De måste kontrolleras för lämplighet i förväg i varje enskilt fall
- När neodisher MediKlar används på avsett sätt påverkas inte biokompatibiliteten hos de behandlade instrumenten (biologisk bedömning av medicintekniska produkter enligt EN ISO 10993-1).

Särskilda egenskaper:

- Förkortar torktiden avsevärt
- Minskar den tid och energi som krävs för maskinell behandling

Användning och dosering:

neodisher MediKlar används i den sista sköljningen i rengörings- och desinfektionsapparater. Doseringsmängden

beror bland annat på diskgodset och vattenkvaliteten och är 0,3–1,0 ml/l. Doseringen sker till det sista sköljvattnet.

Lämpliga doseringsapparater måste användas för dosering.

För att undvika vattenfläckar rekommenderas användning av helt avmineraliserat vatten i den sista sköljningen.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- Bruksanvisningarna från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.
- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664.

Tekniska data:

pH-värde	6,4 (0,3–1,0 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,0 g/cm ³ (20 °C)



Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s

tvätt- och rengöringsmedelsförordning

648/2004:

< 5 % anjoniska tensider, polykarboxylat

5–15 % icke-joniska tensider

även konserveringsmedel

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin, blandning av:

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr

247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

[EG-nr 220-239-6] (3:1)

CE-märkning:

neodisher MediKlar uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan 0 och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 2 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen .

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- och miljöinformation finns i säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4045/3-3
Version: 05/2023

