



neodisher® MediZym



pH-neutralt rengöringsmedel för behandling av termostabila och termolabila instrument

Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Maskinell rengöring av kirurgiska instrument, anesthesiutrustning, flexibla endoskop, behållare och annan medicinteknisk utrustning

Effektspektrum:

- Avlägsnar rester av torkat och denaturerat blod
- Rostfritt stål, instrumentstål, lättmetall, glas, vanliga plaster samt material i anesthesiutrustning och flexibla endoskop är resistent mot neodisher MediZym-appliceringslösning


Särskilda egenskaper:

- Hög grad av materialskydd
- På pH-neutral basis med enzymer och andra rengöringsstödjande komponenter

Användning och dosering:

neodisher MediZym användas i rengörings- och desinfektionsapparater samt i dopp- och ultraljudsbad. Doseringsmängden beror bl.a. på användningsområdet och graden av nedsmutsning av instrument. Följande parametrar rekommenderas när du använder neodisher MediZym:

Maskinell rengöring av termostabila och termolabila instrument	2–10 ml/l (0,2–1,0 %), 40–50 °C, 5–10 min
Maskinell rengöring av flexibla endoskop	5 ml/l (0,5 %), 5–10 min
Manuell rengöring av termostabila och termolabila instrument i doppbad	5–20 ml/l (0,5–2,0 %), max. 45 °C, 20–30 min

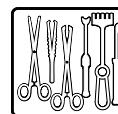

Manuell rengöring av termostabila och termolabila instrument i ultraljudsbad	5–20 ml/l (0,5–2 %), max. 45 °C, 5–10 min
--	---

Appliceringslösningen måste förnyas minst varje arbetsdag och bytas omedelbart om den är synligt smutsig.

neodisher MediZym-appliceringslösningen måste sköljas av helt med vatten (helst avmineraliserat). För att undvika vattenfläckar rekommenderas användning av helt avmineraliserat vatten i den sista sköljningen.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.
- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664.
- Bruksanvisningarna från tillverkarna av rengörings- och desinfektionsapparaterna måste följas.

Tekniska data:

pH-värde	7,9 (2–20 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Densitet	ca 1,0 g/cm ³ (20 °C)
Viskositet	< 10 mPas (koncentrat, 20 °C)



neodisher[®] MediZym

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:

< 5 % anjoniska tensider

dessutom: enzymer, konserveringsmedel

(2-fenoxietanol)

CE-märkning:

neodisher MediZym uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter. Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

Förvara på en sval men frostfri plats. En temperatur på mellan 0 °C och 25 °C måste hållas under förvaringen. Skyddas från solljus. Kan lagras i 2 år om det förvaras på rätt sätt. Används före: Se märkning på etiketten bakom symbolen .

Faro- och säkerhetsanvisningar:

Säkerhets- och miljöinformation finns i säkerhetsdatabladet. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet "Service/nedladdningar".

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

MB 4040/3-3 Version 05-2021