
neodisher® TN





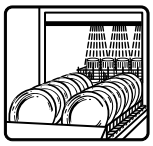

Neutral specialspolglans för material som är svåra att väta

Flytande koncentrat

Användningsområde:

- Glansköljning av porslin, glas, bestick, brickor och arbetsutrustning i kommersiella diskmaskiner samt behållare och transportvagnar i dekontamineringssystem i alla livsmedelsföretag såsom storkök, slakterier och bagerier
- Sköljning av material som är svåra att väta, t.ex. sängramar, sängskåp och transportvagnar i dekontamineringssystem på sjukhus och vårdavdelningar

Effektspektrum:

- Uppnår ett lysande sköljmedelsresultat tack vare mycket god vätning av alla material
- God materialkompatibilitet, speciellt anpassat till de olika materialen i sängramar och sängskåp
- Särskilt lämpligt för användning med mjukt vatten
- När neodisher TN används på avsett sätt påverkas inte biokompatibiliteten hos de behandlade medicintekniska produkterna (biologisk bedömning av medicintekniska produkter enligt EN ISO 10993-1)

Särskilda egenskaper:

- Uppnår utmärkt vätning och dropp- och ränderfri torkning även av svårvätta plastdelar
- Låg förbrukning
- Jämn och restfri torkning

Användning och dosering:

neodisher TN kan användas i industriella diskmaskiner och dekontamineringssystem. Doseringen av neodisher TN till det slutliga sköljvattnet utförs av en automatisk doseringsapparat. Doseringen beror på vattenkvalitet, typ och material på diskgodset samt sköljtemperaturen. Den optimala doseringen av neodisher TN bör ställas in vid idrifttagningen av maskinen.

Beroende på vattenkvalitet, diskgods och sköljtemperatur	0,1–0,8 ml/l

Om vattnet är hårt eller har hög salthalt måste en särskild vattenbehandling utföras för att sköljresultatet ska bli optimalt. För att undvika vattenfläckar rekommenderas användning av helt avmineraliserat vatten i den sista sköljningen.

Allmän information om användning:

- Endast för kommersiella tillämpningar.
- Får inte blandas med andra produkter.
- Spola doseringssystemet inklusive sugslangarna med vatten innan du byter produkt.
- Bruksanvisningarna från maskintillverkarna måste följas.
- Behandlingen måste utföras i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och tillämpliga föreskrifter med hjälp av lämpliga validerade förfaranden.
- Följ rekommendationerna för behandling från tillverkaren av den medicintekniska produkten i enlighet med kraven i DIN EN ISO 17664, rekommendationerna för behandling från tillverkaren av sängramen och rekommendationerna från arbetsgruppen för dekontaminerings-system för sängramar och vagnar (AK-BWA) i den aktuella utgåvan av AK-BWA-broschyren ”Maskinell dekontaminering”.
- Häll inte över till andra behållare, flaskor etc.!

Tekniska data:

pH-värde	6,7–7,0 (0,1–0,8 ml/l, bestämt i helt avmineraliserat vatten, 20 °C)
Viskositet	< 50 mPas (koncentrat, 20 °C)
Densitet	ca 1,0 g/cm^3 (20 °C)

neodisher® TN

Ingredienser:

Ingredienser för rengöringsmedel enligt EG:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning 648/2004:
< 5 % fosfonater, polykarboxylater
15–30 % icke-joniska tensider
även konserveringsmedel
Reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)

CE-märkning: CE MD

neodisher TN uppfyller de krav som följer av europeisk lagstiftning om medicintekniska produkter.

Om ett allvarligt tillbud inträffar med denna produkt måste det rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Förvarningsanvisningar:

En temperatur på mellan 0 °C och 30 °C måste hållas under förvaringen. Kan lagras i 3 år om det förvaras på rätt sätt. Kan användas tills: Se märkning på etiketten bakom symbolen ⌛.

Faro- och säkerhetsanvisningar:

neodisher TN är inte något farligt ämne enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

När produkten används på avsett sätt är den ofarlig i enlighet med relevanta riktlinjer för livsmedelshantering.

Kassera endast tomma och förslutna behållare. Bortskaffande av rester av fyllnadsmaterial: Se säkerhetsdatabladet.

Ytterligare säkerhets- samt miljöinformation finns i säkerhetsdatabladen. Dessa finns tillgängliga på www.drweigert.de i avsnittet ”Service/nedladdningar”.

MB 3115/3-4
Version: 06/2021

Informationen i detta informationsblad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Den befriar inte användaren från att utföra egna tester och prövningar.
En juridiskt bindande försäkran om vissa egenskaper kan inte härledas från denna information.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com